

beurer HK Limited Edition



S Värmekudde Brugsanvisning



BEURER GmbH • Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)
www.beurer.com • Mail: kd@beurer.de



Innehåll

1. Förpackningsinnehåll	3	4.4 Ställa in temperaturen	5
1.1 Produktbeskrivning	3	4.5 Automatisk avstängning	6
2. Viktig information		4.6 Stänga av	6
Spara bruksanvisningen så att den kan användas senare	3	5. Rengöring och skötsel	6
3. Avsedd användning	5	6. Förvaring	7
4. Användning	5	7. Avfallssortering	7
4.1 Säkerhet	5	8. Vad gör jag om problem uppstår?	7
4.2 Användning	5	9. Tekniska data	7
4.3 Inkoppling	5		

Teckenförklaring

	Läs anvisningarna!		Kan tvättas i maskin på handtvättsprogrammet vid 30 °
			Får ej blekas
	Stick ej nålar i dynan!		Får ej torktumlas
			Får ej strykas
	Får ej användas ihopvikt eller ihopskjuten!		Ej kemtvätt
	Får inte användas av barn under tre år!		De textilier som har använts för denna apparat uppfyller de höga humanekologiska kraven i Öko-Tex Standard 100, vilket har fastställts av forskningsinstitutet Hohenstein.
	WARNING; Varnar för risk för personskada eller fara för hälsan.		


	OBS; Varnar för risk för skador på apparaten eller dess tillbehör.
	OBSERVERA; Indikerar viktig information.

1. Förpackningsinnehåll

- 1 Värmedyna
- 1 Kontrollenhet
- 1 Bruksanvisning

1.1 Produktbeskrivning

- 1. nätkontakt
- 2. nätkabel
- 3. kontrollenhet
- 4. upplyst visning av temperaturstegen
- 5. skjutreglage för PÅ/AV och temperaturnivåer
- 6. stickkontakt

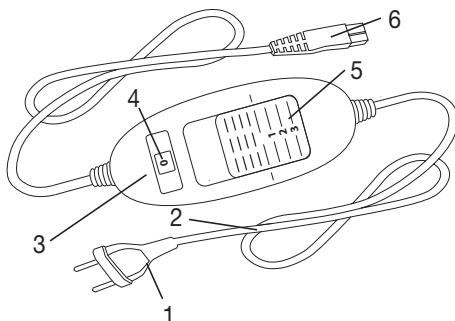

2. Viktig information

Spara bruksanvisningen så att den kan användas senare



VARNING

- Om nedanstående anvisningar inte följs kan konsekvensen bli personskador eller materiella skador (elstöt, brännskador, brand). Följande säkerhetsanvisningar och varningar skyddar inte bara din hälsa och andra personers hälsa, utan även produkten. Följ säkerhetsanvisningarna och låt bruksanvisningen följa med produkten om den ska användas av någon annan.
- Värmedynan får inte användas av personer som är okänsliga för värme eller av personer som inte kan reagera på överhettning (till exempel diabetiker, personer med sjukdomsframkallade hudförändringar, personer med ärr i behandlingsområdet eller personer som har tagit läkemedel eller druckit alkohol).
- Värmedynan får inte användas av mycket små barn (0–3 år) eftersom dessa inte kan reagera på överhettning.
- Värmedynan får inte användas av minde barn (3–8 år) om inte kontrollenheten ställs in av en förälder eller ansvarig person och barnet har fått tillräckliga instruktioner om hur värmedynan används på ett säkert sätt.

- Värmedynan får användas av barn över 8 år och av personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande erfarenheter och kunskaper under förutsättning att de övervakas eller instrueras i hur produkten ska användas på ett säkert sätt och förstår vilka risker det innebär.
- Låt inte barn leka med värmedynan.
- Rengöring och allmänt underhåll får endast utföras av barn under uppsikt av en vuxen.
- Värmedynan är inte avsedd för användning på sjukhus.
- Stick inga nålar i produkten
- Får ej användas hopvikt eller hoprullad!
- Får ej användas våt
- Värmedynan får enbart användas tillsammans med den kontrollenhet som anges på etiketten.
- De elektriska och magnetiska fält som avges av denna värmedyna kan ibland störa funktionen hos en pacemaker. De ligger dock långt under gränsvärdena för elektrisk fältstyrka: max. 5 000 V/m, magnetisk fältstyrka: max. 80 A/m, magnetisk flödesdensitet: max. 0,1 milli-Tesla.
Rådgör med din läkare och tillverkaren av pacemakern innan du använder värmedynan.
- Dra inte i kablarna, vrid dem inte och böj eller vik dem inte kraftigt.
- Kontrollera regelbundet om värmedynan är skadad eller sliten.
Om sådana tecken finns, om värmedynan har används på ett felaktigt sätt eller om den inte värms upp längre måste den kontrolleras av tillverkaren innan den används igen.
- Om produktens nätanslutningskabel skadas måste den bytas ut av tillverkaren eller tillverkarens kundtjänst eller av en person med likvärdiga kvalifikationer för att undvika fara.
- När värmedynan är inkopplad får
 - inget föremål (exempelvis väska eller tvättkorg) placeras ovanpå.
 - inga värmekällor som värmeflaskor, värmedynor eller liknande läggas ovanpå.
- De elektroniska komponenterna i kontrollenheten värms upp när värmedynan används. Kontrollenheten får därför inte övertäckas eller ligga ovanpå värmedynan när den används.
- Följ bruksanvisningen rörande användning (avsnitt 4), rengöring och skötsel (avsnitt 5) och förvaring (avsnitt 6).
- Om du vill veta mer om användningen av våra produkter är du välkommen att ta kontakt med vår kundtjänst.

3. Avsedd användning



OBS

Denna värmedyna får enbart användas för att värma upp den mänskliga kroppen.

4. Användning

4.1 Säkerhet



OBS

Värmedynan är försedd med ett SÄKERHETSSYSTEM. Denna sensorteknik förhindrar att värmedynans hela yta överhettas genom automatisk avstängning vid fel. Om SÄKERHETSSYSTEMET har kopplat ur värmedynan lyser inte längre temperaturstegen i inkopplat läge.

Observera att värmedynan inte längre kan användas efter ett fel av säkerhetsskäl, utan måste skickas in till den angivna serviceadressen.


4.2 Användning



OBS

Se till att värmedynan inte viks ihop eller veckas vid användning.

- Anslut först kontrollenheten till värmeenheten genom att koppla ihop stickkontakten.
- Sätt sedan i nätkontakten i eluttaget.

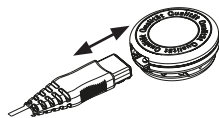

4.3 Inkoppling

Ställ in skjutreglaget för PÅ/AV och temperaturnivåerna i läge 1, 2 eller 3 för att sätta igång värmedynan. Temperaturnivåerna (4) är belysta när produkten är påslagen.

4.4 Ställa in temperaturen

Nivå 0: AV

Nivå 1: Minimal värme

Nivå 2: Medelvärme

Nivå 3: Maxvärme



OBSERVERA

Värmedynan värms upp snabbast om du ställer in den högsta temperaturnivån först.



OBSERVERA

Denna värmedyna har en snabbuppvärmningsfunktion som ger snabb uppvärmning under de första tio minuterna.



VARNING

Om värmedynan används under flera timmar rekommenderar vi att den lägsta temperaturnivån ställs in via kontrollenheten, för att undvika att användaren blir för varm och att det uppstår brännskador.

4.5 Automatisk avstängning

Värmedynan har en automatisk avstängningsfunktion. Värmetillförseln stängs automatiskt av cirka 90 minuter efter det att värmedynan har satts igång. Indikatorn för temperaturnivå börjar då blinka. Om du vill starta värmedynan igen måste du först ställa in skjutreglaget för PÅ/AV och sedan temperaturnivå (5) på nivå „0“ (AV). Efter cirka fem sekunder kan du starta den igen.



4.6 Stänga av

Ställ in skjutreglaget för PÅ/AV och temperaturnivåerna på nivå „0“ (AV) för att stänga av värmedynan. Temperaturstegen släcks då.



OBSERVERA

När värmedynan inte användas längre ställer du in skjutreglaget för PÅ/AV och temperaturstegen på nivå „0“ (AV) och drar ut nätkontakten från eluttaget. Dra sedan ut kontakten och därmed kontrollenheten från värmedynan.

5. Rengöring och skötsel



VARNING

Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget före rengöring. Dra sedan ut kontakten och därmed kontrollenheten från värmedynan. I annat fall kan dynan skadas.



OBSERVERA

- Kontrollenheten får aldrig komma i kontakt med vatten eller andra vätskor. I annat fall kan den skadas.

Rengör kontrollenheten med en torr luddfri trasa. Använd inga kemiska rengöringsmedel eller allrengöringsmedel.

Mindre fläckar på värmedynan kan avlägsnas med en fuktad trasa samt vid behov lite flytande fintvättmedel.



OBSERVERA

- Observera att värmedynan inte får rengöras kemiskt, vridas ur, torkas i maskin, manglas eller strykas.

Värmedynan kan tvättas i maskin.

Ställ tvättmaskinen på ett särskilt skonsamt tvättprogram vid 30 °C (ylletvätt). Använd ett fintvättmedel och dosera det enligt tillverkarens anvisningar.



OBSERVERA

- Observera att värmedynan slits om den tvättas alltför ofta. Värmedynan får därför tvättas max i tio gånger i tvättmaskin under hela livslängden.

Direkt efter tvätten ska den ännu fuktiga värmedynan dras till originalmåtten i formen. Låt den sedan torka plant utbredd över en tvättställning.



OBSERVERA

- Använd inga tvättklämmor eller liknande för att fästa värmedynan vid tvättställningen. I annat fall kan dynan skadas.
- Anslut inte omkopplaren till värmedynan förrän stickproppen och värmedynan har torkat helt. I annat fall kan dynan skadas.



VARNING

- Koppla aldrig in värmedynan för att den ska torka! Risk för elstötar.

6. Förvaring

Om du inte tänker använda värmedynan under en längre tid rekommenderar vi att du förvarar den i originalförpackningen. Dra ut kontakten och därmed kontrollenheten från värmedynan.



OBSERVERA

Låt värmedynan svalna först. I annat fall kan dynan skadas. Lägg inga föremål på värmedynan under förvaringen för att undvika att den böjs tvärt.

7. Avfallssortering

Avfallssortera apparaten enligt EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Om du har frågor som rör avfallshantering vänder du dig till ansvarig kommunal myndighet.



8. Vad gör jag om problem uppstår?

Problem	Orsak	Åtgärd
Temperaturnivåerna lyser inte när - kontrollenheten är helt kopplad till värmedynan - nätkontakten är ansluten till ett fungerande eluttag - skjutreglaget står på steg 1, 2 eller 3	Säkerhetssystemet har stängts av värmedynan och den går inte att använda.	Skicka in värmedynan och kontrollenheten för service.

9. Tekniska data

Se typskyltsetiketten på värmedynan.

